


レメダ 電動昇降式展開台車 取扱説明書

1. 安全上の注意

- 1) 本体及びチャージャーを分解したり改造しないでください。
- 2) 爆発の危険性がある場所では使用しないでください。
- 3) 充電中は、チャージャーのコードを引っ張ったり、テーブルを移動させたりしないでください。
プラグやコードに損傷を与え、それによって漏電を引き起こし、電気システム内のヒューズが切れる可能性があります。
- 4) 水や液体をかけないでください。内部の電気回路がショートする等、故障の原因になります。
- 5) 必ず専用のチャージャーで充電してください。
- 6) 定格電圧 AC100V/50・60Hz でご使用ください。
- 7) 平らな場所でご使用ください。
- 8) テーブルを昇降させる際は、周辺のものに当たらないよう確認してから行ってください。
- 9) テーブル上に耐荷重を超える力がかからないようにしてください。転倒するおそれがあります。

2. 製品概要と各部・付属品の名称

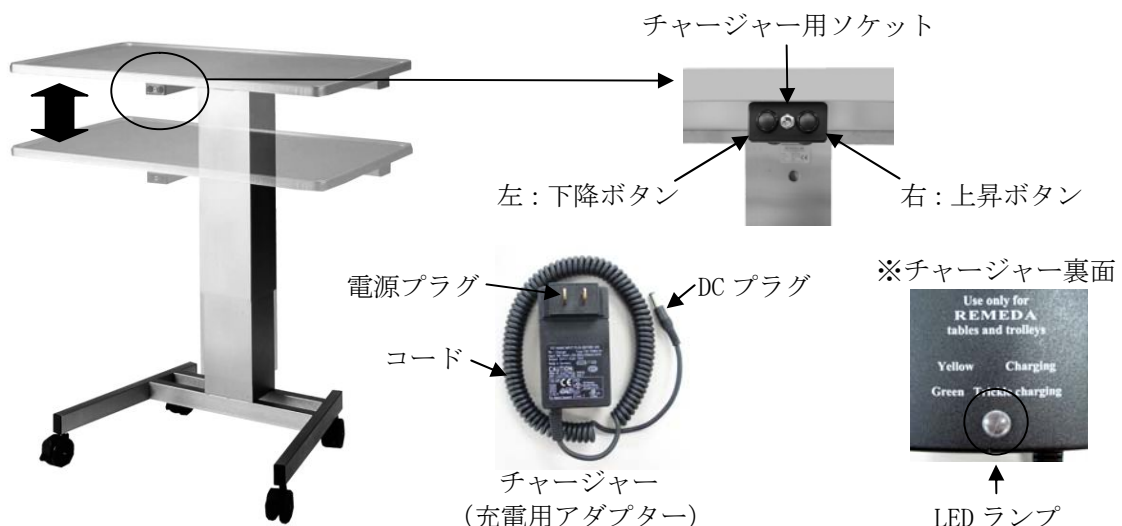

3. 使用前の準備に関する事項

ご使用の前に、テーブル本体のバッテリーを充電してください。

- 1) チャージャーのDCプラグをレメダ電動昇降式展開台車のチャージャー用ソケットに挿入します。
- 2) 電源プラグを電源コンセントへ差し込んでください。
- 3) 充電が完了したら、チャージャーのDCプラグをレメダ電動昇降式展開台車から取り外し、電源プラグを電源コンセントから取り外してください。
レメダ電動昇降式展開台車からDCプラグを取り外す際は、プラグ部分をしっかりと握りまっすぐ引き抜いてください。

【LEDランプの表示】

LED ランプにより充電状態を確認することができます。

- ・ 黄色→通常充電
- ・ 緑色→トリクル充電（バッテリーの自己放電を補う低電圧維持充電）

※通常充電からトリクル充電へ切り替わる時は、緑色がチカチカと点滅します。

※LED が点灯しない場合は、充電が行われていません。

注意

- ① 長期間使用されなかった場合の充電には最低 8 時間必要です。
- ② 充電量が 50% のレベルに落ちると、昇降用ボタンを押している間のみ、「再充電」ブザーが鳴り続けます。
※ バッテリーの寿命を保つために、50% レベルに落ちる前に再充電してください
- ③ バッテリーは、満充電で 2～3 週間使用できます。満充電には、約 12 時間必要です。

4. 一般的な使用方法とその注意事項

- 1) 平らな場所でご使用ください。
- 2) テーブルを上昇させる場合は右側の上昇ボタンを、下降させる場合は左側の下降ボタンを押してください。

注意

両方のボタンを同時に押さないでください。故障の原因となります。

5. 清掃方法

中性洗剤又は水で湿らせた布で清拭した後、乾いた布で拭き取ることをおすすめします。

注意

水をかけての清掃はできません。故障の原因となります。

6. 保守点検に関する事項

年 1 回、下記項目について点検することをおすすめします。

- 1) チャージャーのコードや DC プラグに破損や断線はないか
- 2) テーブルの最高位置、最低位置での安定性はどうか
- 3) テーブルを上下に操作した際、異音がなくスムーズに動くか
- 4) 昇降ボタンやチャージャー用ソケットに破損はないか
- 5) キャスターに破損はないか

修理や部品等交換の際は、お買い上げの販売店へご相談ください。

7. トラブルシューティングに関する事項

症 状	考えられる理由	対 策
テーブルが昇降しない	バッテリーが空になっている	充電してください
	昇降ボタンの接触不良	お買い上げの販売店にご相談ください
充電してもテーブルが昇降しない	故障	お買い上げの販売店にご相談ください
充電してもすぐに昇降しなくなる	バッテリーの寿命	お買い上げの販売店にご相談ください
昇降時に異音がする	故障	お買い上げの販売店にご相談ください
キャスターの動きが悪い	キャスターにゴミが詰まっている	キャスターを清掃してください
	キャスターが壊れている	お買い上げの販売店にご相談ください

上記以外の場合、お買い上げの販売店にご相談ください。

8. 技術仕様

定格電圧：100V/50・60Hz

消費電力：25VA

出力：24V

出力電流：最大 500mA

ヒューズ：200mA スローブロー型

操作：連続性

耐荷重：

支柱中心部：約 50kg

支柱中心から 25cm：約 20kg

支柱中心から 50cm：約 10kg

9. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>

注文コード	品番	商品名
580-002-01	10023-01	レメダ電動昇降式展開台車, 70×50cm, 80-120cm, 上下昇降
580-002-02	10023-02	レメダ電動昇降式展開台車, 95×55cm, 80-120cm, 上下昇降
580-002-03	10023-11	レメダ電動昇降式展開台車, 70×50cm, 90-140cm, 上下昇降
580-002-04	10023-12	レメダ電動昇降式展開台車, 95×55cm, 90-140cm, 上下昇降
580-002-07	35033-02	レメダ チャージャー, 24V, 0.5A, レメダ電動昇降式展開台車用

10. 保証

保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
- 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
 - 消耗部品。
 - 故障の原因が本品以外に起因する場合。
 - その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、**レメダ 電動昇降式展開台車** をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: **レメダ 電動昇降式展開台車**
製造番号:
ご芳名

ご住所

TEL. ()

お買い上げ店名

印

住所

TEL. ()

お買い上げ日 年 月 日

販売元: 村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546